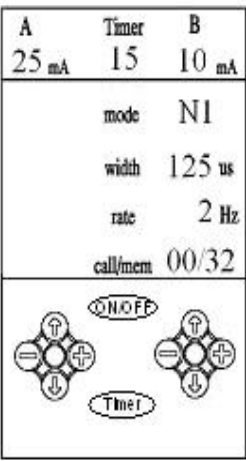
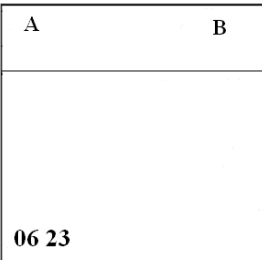


Zusätzliche Einstellungsmöglichkeiten für Elektrostimulationsgeräte DIGITAL FIT TENS 1200 und DIGITAL FIT TENS/EMS 1200

Display TENS und TENS-EMS 1200	Funktion	Bezeichnung	Cursor Position neben	Einstellungen am Funktions-Button
	Wesentliche separat für Kanal A und B einzustellende Parameter	Betriebsart	Mode	“+” erhöht “-“ verringert Nicht veränderbar unter Lock
		Impulsbreite	Width	“+” erhöht “-“ verringert Nicht veränderbar unter Lock
		Impulsfrequenz	Rate	“+” erhöht “-“ verringert Nicht veränderbar unter Lock
		Intensität	mA	“+” erhöht “-“ verringert Einstellung nur allmählich anpassen
	Behandlungsdauer	Behandlungsdauer einstellen	--	Timer button drücken
	Verriegelung/Entriegeln (Lock/Unlock) Das Wort Lock erscheint rechts neben Kanal A bzw. B	Lock (Verriegeln)	Call/mem	“+” 30 Sekunden drücken
		Unlock (Entriegeln)	Call/mem	“+” 30 Sekunden drücken oder “-“ 30 Sekunden drücken, wenn die Programme 17-32 gleichzeitig mit gelöscht werden sollen
	Programmhandhabung	Programm speichern	call/mem	Alle Parameter vorher einstellen, dann zu call/mem gehen und “+” für 2 Sek. drücken
		Programm auswählen	Call/mem	Mit “+” or “-“ das jeweilige Programm auswählen
		Programm löschen oder Hochladen der 16 voreingestellten Programme, die unter Call/mem nicht mehr angezeigt werden	call/mem	“-“ Taste 30 Sekunden drücken Die Programme 01-16 sind fest installiert und können nicht gelöscht werden. Die Programme 17-32 werden insgesamt gelöscht. Die Löschung nur eines Programms ist nicht möglich.
	Therapie-speicher z.B. steht 06 23 für 62 Stunden und 30 Minuten	Abrufen der kumulierten Therapiedauer	call/mem	Beide “+” buttons gleichzeitig für 5 Sekunden drücken
		Rückkehr zum normalen Betrieb	call/mem	Beide “+” buttons, erneut gleichzeitig für 5 Sekunden drücken
		Rücksetzen der kumulierten Therapiedauer	call/mem	Beide “-“ Buttons gleichzeitig für 5 Sekunden drücken